

범용카테터캐놀러
(MC-14200 외 2783건)

사용설명서

작성	검토	승인

- 정확하고 안전하게 사용하기 위하여 사용 전에 사용설명서를 잘 읽어주십시오.
- 사용 중에 의문사항이나 점검사항이 있을 때 도움이 됩니다.
- 안정상의 주의를 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽은 후에는 반드시 잘 보관하여 주십시오.

00. 목차

01

제품 구성 및 주요 명칭 ----- 3

02


사용방법 및 주의사항 ----- 4~5

03

제품 기재사항 ----- 6

01.

제품 구성 및 주요 명칭

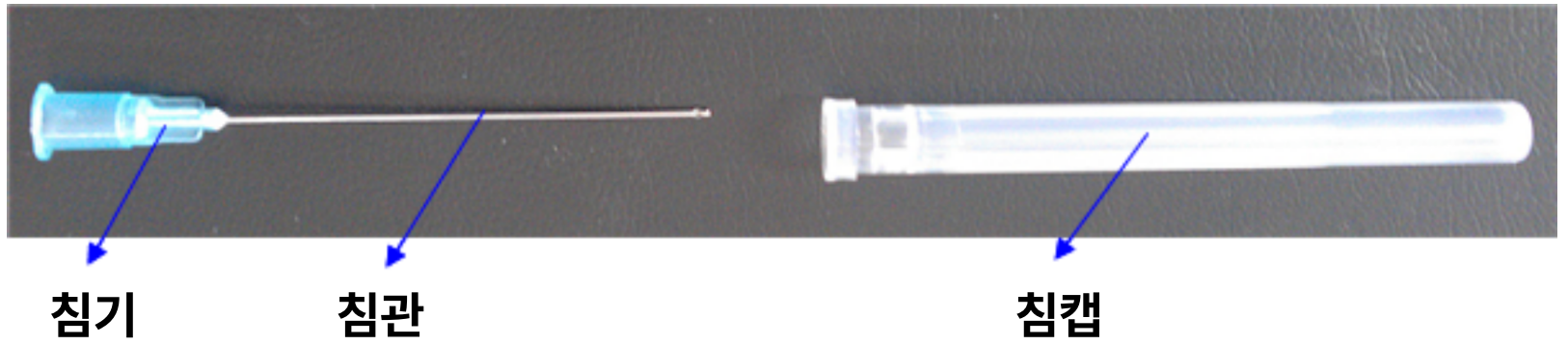

침기

침관을 고정시키고, 다른 기구에 연결한다.

침관

체내로 들어가 약물을 주입하는 용도이다.

침캡

침관덮개로 사용되며 침관의 손상을 막아준다.

02.

사용방법 및 주의사항

● 사용목적

혈관이나 체강에 범용적으로 삽입하는 캐놀러로 커넥터 또는 튜브에 연결된다.

● 사용 전 준비사항

1. 본 제품은 완전 멸균되어 밀폐되어 있으므로 포장의 파손 유무를 확인한다.
2. 포장이 파손된 경우, 사용을 금지한다.

● 사용방법

1. 제품의 포장상태를 확인한 후 이상이 없을 시 개봉하며, 제품의 이상 유무를 확인한다.
2. 포장지를 개봉하여 범용카테터캐놀러를 꺼낸 뒤, 다른 연결기기와 결합하여 사용한다.
3. 반드시 사용 직전에 개봉한다.

● 사용 후 보관 및 관리 방법

1. 본 제품은 일회용이므로, 절대 재사용하지 않는다.
2. 본 제품은 일회용이므로, 사용 후 안전하게 폐기한다.

02.

사용방법 및 주의사항

● 사용 시 주의사항

1. 본 제품은 일회용이므로 사용 후 폐기하여야 하며, 재멸균하여 재사용하는 것을 금한다.
2. 개별(날개)포장이 개봉되거나 파손되어 있는 제품은 멸균을 보장할 수 없으므로 사용을 금한다.
3. 오염된 제품을 사용하게 되면 각종 감염질환과 같은 질병에 전염될 수 있으므로 주의한다.
4. 사용 전 제품에 손상이 가해졌거나 휘어친 캐놀러는 사용을 금한다.
5. 사용 전 제품에 이물질이 발견되면 사용을 금한다.
6. 일반적인 시술목적 이외의 사용을 금한다.

● 저장방법 및 유효기간

1. 저장방법 : 실온보관하며 직사광선 및 고온다습한 곳을 피한다.
2. 유효기간 : 제조일로부터 5년

● 부작용 보고 관련 문의처

- 한국의료기기안전정보원(080-080-4183)

03.

제품 기재사항

1. 제품명 : 범용카테터캐놀러(일회용)
2. 형명(모델명) : MC-14200 외 2783건
3. 제조업자의 상호 : (주)나눔컴퍼니
4. 제조업자의 주소 : 대구광역시 수성구 고모로41길 5
5. 제조업자의 연락처 : TEL)053-795-7076~7 / FAX)053-795-7078
6. 제조업 허가번호 : 제4869호
7. 품목허가번호 : 제인 13-501호
8. 포장단위 : 자사포장단위

* 본 제품은 의료기기임