

Nanum Syringe
(NS-50 외 2건)

사용설명서

작성	검토	승인

- 정확하고 안전하게 사용하기 위하여 사용 전에 사용설명서를 잘 읽어주십시오.
- 사용 중에 의문사항이나 점검사항이 있을 때 도움이 됩니다.
- 안정상의 주의를 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽은 후에는 반드시 잘 보관하여 주십시오.

00. 목차

01

제품 구성 및 주요 명칭 ----- 3

02


사용방법 및 주의사항 ----- 4~5

03

제품 기재사항 ----- 6

01.


제품 구성 및 주요 명칭

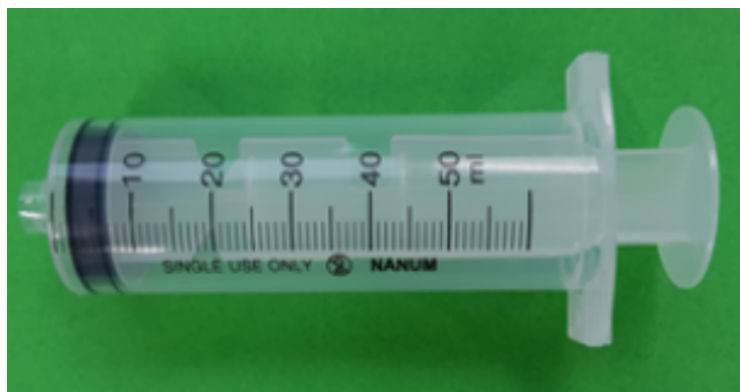

1) Luer Lock Clip TYPE



2) Luer Lock TYPE

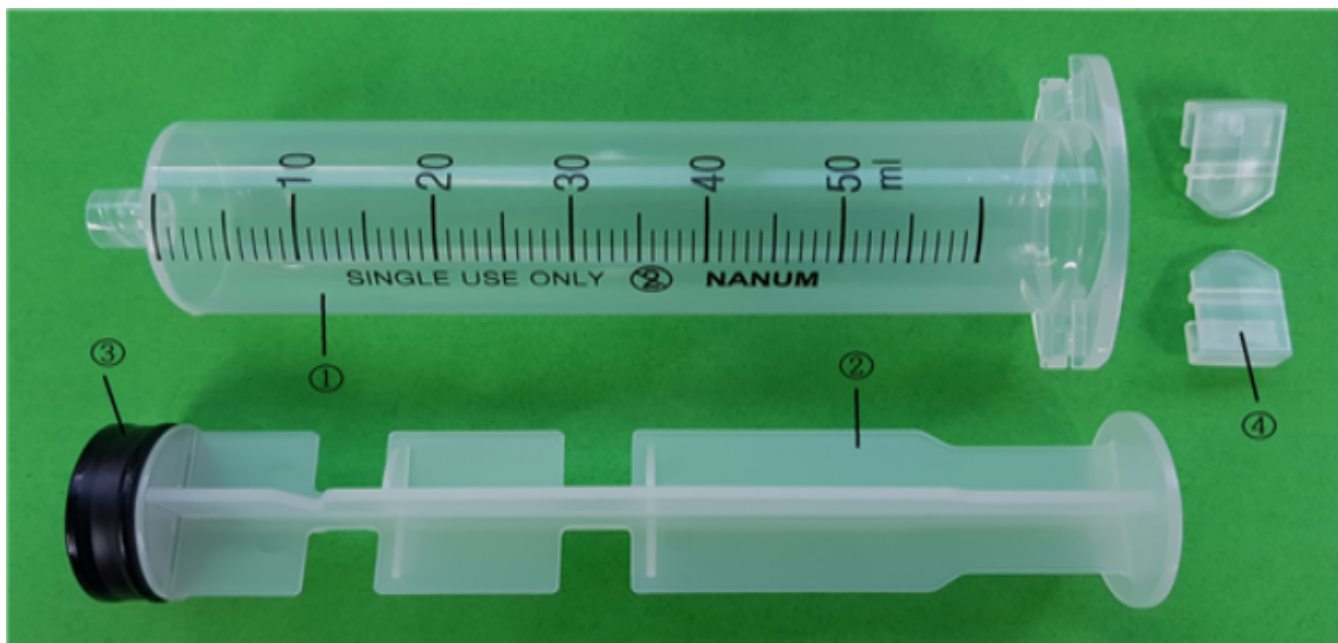

번호	부품명	기능설명
①	외통(Cylinder)	원통형 모양의 용기로, 침기와 결합되는 통끝쪽은 Lock 기능이 있고 50ml 외통손잡이의 경우 ④클립이 결합된다.
②	밀대(Plunger)	흡자를 전진, 후퇴시키는데 필요한 힘을 흡자에 전달하는 역할을 한다.
③	흡자(Gasket)	약액 등을 흡입 및 방출시키는 기능을 하며, 약액 등이 새는 것을 방지한다.
④	클립(Clip)	외통 손잡이 부분에 결합되며, 밀대를 고정하는 역할을 한다.

사용방법 및 주의사항

• 사용목적

의약품 등을 체내에 주입 및 지방채취를 하는데 사용하는 플라스틱 멸균 주사기

• 사용 전 준비사항

제품 개봉 전, 포장된 주사기의 이상유무(부품 누락 등) 및 포장의 완전성을 확인한 후, 이상이 없을 시 개봉한다.

• 사용방법

1. 약물을 주입하고자 하는 경우

- 포장지를 개봉하여 주사기를 꺼낸 뒤, 알맞은 게이지의 범용카테터캐놀러(별도 인증 제품)를 선택하여 통끝에 연결한다.
- 밀대를 후퇴시켜 약액을 흡입한 후 밀대를 전진시켜 주사기 내의 공기를 제거한다.
- 해당 부위를 깨끗이 소독한 후 별도 인증 제품으로 해당 부위를 천자한다.
- 범용카테터캐놀러(별도 인증 제품)가 결합된 주사기를 천자한 부위에 삽입 후 밀대를 눌러 주사한다.
- 시술 부위를 소독된 거즈로 압박하여 지혈시킨다.

2. 지방 채취를 하고자 하는 경우

- 주사기와 결합된 범용카테터캐놀러를 천자된 부위에 삽입 후 밀대를 후퇴시켜 지방 및 약물을 흡입한다.
- 클립이 부착된 50ml 시린지의 경우 락킹기능(음압유지)을 이용하여 흡입을 용이하게 한다.
(50ml 시린지의 경우 30ml, 50ml 부위에 락킹(음압유지)이 가능)
- 흡입이 완료되면 주사기와 결합된 캐놀러를 몸속에서 빼내고 주사기 락킹을 해제하여 음압을 푼다.(밀대 앞쪽의 홈 부위를 부러뜨려 주사기 뒷마개로 사용 가능)
- 시술 부위를 소독된 거즈로 압박하여 지혈시킨다.

사용방법 및 주의사항

• 사용 후 보관 및 관리 방법

1. 본 제품은 일회용이므로, 절대 재사용하지 않는다.
2. 본 제품은 일회용이므로, 사용 후 안전하게 폐기한다.

• 사용 시 주의사항

1. 본 제품은 일회용이므로 사용 후 폐기하여야 하며, 재멸균하여 재사용하는 것을 금한다.
2. 본 제품은 의료기기이며, 사용목적 및 사용방법, 주의사항을 숙지하고 사용한다.
3. 유효기간이 경과된 제품의 사용을 금한다.
4. 사용 전 포장의 손상 및 이물질 발견 시 사용을 금한다.
5. 사용 직전에 개봉하고 개봉 후 바로 사용한다.
6. 일반적인 시술목적 이외의 사용을 금한다.

• 저장방법 및 유효기간

1. 저장방법 : 상온보관하며 직사광선 및 고온다습한 곳을 피한다.
2. 유효기간 : 제조일로부터 3년

• 부작용 보고 관련 문의처

- 한국의료기기안전정보원(080-080-4183)

03.

제품 기재사항

1. 제품명 : Nanum Syringe(일회용)
2. 형명(모델명) : NS-50 외 2건
3. 제조업자의 상호 : (주)나눔컴퍼니
4. 제조업자의 주소 : 대구광역시 수성구 고모로41길 5
5. 제조업자의 연락처 : TEL)053-795-7076~7 / FAX)053-795-7078
6. 제조업 허가번호 : 제4869호
7. 품목허가번호 : 제인 20-4166호
8. 포장단위 : 자사포장단위

※ 본 제품은 의료기기임