

범용카테터캐놀러
(NM-TC-001 외 3365건)

사용설명서

작성	검토	승인

- 정확하고 안전하게 사용하기 위하여 사용 전에 사용설명서를 잘 읽어주십시오.
- 사용 중에 의문사항이나 점검사항이 있을 때 도움이 됩니다.
- 안정상의 주의를 반드시 읽고 정확하게 사용하여 주십시오.
- 읽은 후에는 반드시 잘 보관하여 주십시오.

00. 목차

01

제품 구성 및 주요 명칭 ----- 3

02


사용방법 및 주의사항 ----- 4~5

03

제품 기재사항 ----- 6

01.

제품 구성 및 주요 명칭

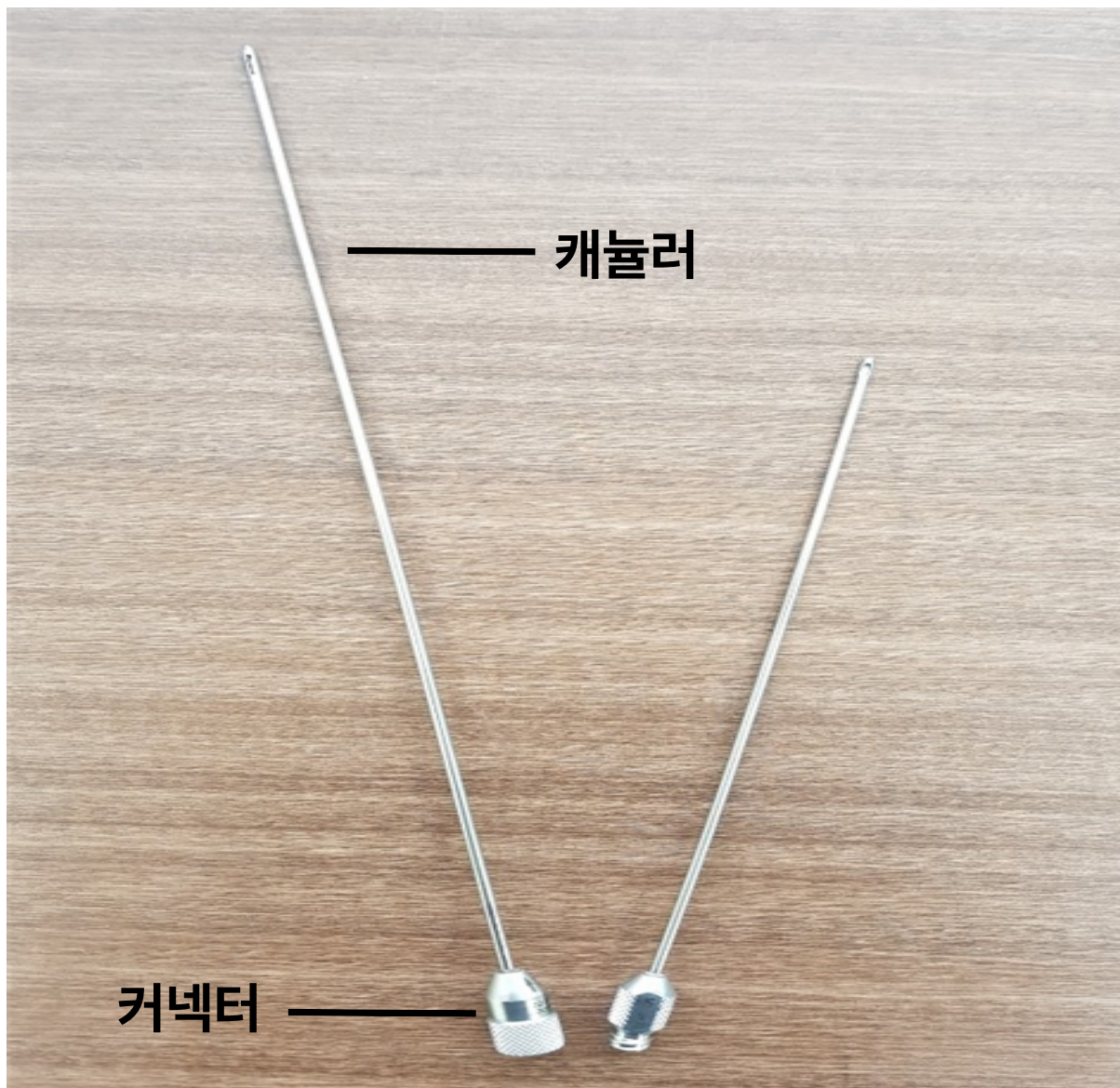

캐놀러

혈관이나 체강에 삽입하여 흡입 및 주입을 목적으로 하며 다양한 홀 모양이 있음.

커넥터

캐놀러를 주사기 또는 핸들에 연결할 수 있도록 해주는 커넥터

사용방법 및 주의사항

• 사용목적

혈관이나 체강에 삽입하여 커넥터 또는 튜브 등에 연결하여 흡입 및 주입을 목적으로 함.

• 사용 전 준비사항

1. 보관 중인 카테터캐놀러가 사용하기 위한 청결상태 및 멸균상태를 유지하는지 확인한다.
2. 멸균복을 착용하지 않은 사람은 멸균된 기구에 닿지 않도록 한다.
3. 사용 전에 외관상 현저한 변형이나, 핀홀, 이물질 부착 등을 확인하여야 한다.

• 사용방법

1. 반드시 정해진 용도로만 사용하며, 이외의 용도로 무리하게 사용하지 않도록 한다.
2. 심한 충격이나 바닥에 떨어뜨렸을 경우, 다른 기구로 대체하여 사용한다.
3. 사용도중 부식이나 크랙 등이 발견되었을 경우, 즉시 사용을 중단하고 다른 기구로 대체하여 사용한다.

• 멸균방법과 조건(사용자 멸균)

1. 멸균하는 방법은 고압증기멸균으로 한다.
2. 멸균 시에 멸균방법을 준수하고 설비는 제조회사의 사용방법에 따른다.
3. 멸균과 건조 시 기구 간에 최소한의 접촉을 하도록 배분하여 트레이에 보관한다.
4. 오토클레이브 : 132°C, 압력 1kgf/cm²에서 10~15분간 멸균

사용방법 및 주의사항

• 사용 시 주의사항

1. 기구의 멸균 시 얼룩이 발생할 수 있으므로 멸균기 제조업체의 지시사항에 따라야 하며, 수증기가 완전히 제거될 때까지 커버를 열지 않도록 한다.
2. 세척에 철분이 많이 포함 되어 있는 물을 사용할 경우 녹으로 채색된 피막이 형성될 수 있으므로 전문가에게 상수처리 문제의 평가수치를 의논한 후 사용한다.
3. 반드시 정해진 용도로만 사용하며, 이외의 용도로 무리하게 사용하지 않도록 한다.
4. 보관, 사용의 문제 발생 시 제조회사에 연락을 위하여 사후조치 및 재발 방지를 강구한다.

• 사용 후 보관 및 관리 방법

1. 세척 : 카테터캐놀러는 사용 후 혈액이나 이물질이 말라붙는 것을 방지하거나 마른 혈액이나 이물질을 제거하기 위해 먼저 물에 담근 다음 손이나 기계로 세척한다.
2. 검사 : 효과적인 멸균을 위해 세척상태를 확인한다.

• 저장방법 및 유효기간

1. 저장방법 : 실온보관한다.
2. 유효기간 : 해당사항 없음.

• 부작용 보고 관련 문의처

- 한국의료기기안전정보원(080-080-4183)

03.

제품 기재사항

1. 제품명 : 범용카테터캐놀러(사용자멸균)
2. 형명(모델명) : NM-TC-001 외 3365건
3. 제조업자의 상호 : (주)나눔컴퍼니
4. 제조업자의 주소 : 대구광역시 수성구 고모로41길 5
5. 제조업자의 연락처 : TEL)053-795-7076~7 / FAX)053-795-7078
6. 제조업 허가번호 : 제4869호
7. 품목허가번호 : 제인 08-772호
8. 포장단위 : 자사포장단위

※ 본 제품은 의료기기임